

Slide-2-Safety™ veilige bloedcollectie-set

Voor veilige bloedafname met volledige handmatige
controle over het naaldveiligheidsmechanisme



Productomschrijving

De VenoFlow™ Slide-2-Safety™ bloedafnameset is ontwikkeld voor het veilig en efficiënt afnemen van bloed. De set is voorzien van een handmatig te bedienen veiligheidsmechanisme, waarmee de zorgprofessional na gebruik het beschermingsmechanisme over de naald schuift en de naald veilig vergrendelt.

Dankzij deze handmatige bediening behoudt de gebruiker volledige controle over het activeren van het veiligheidsmechanisme. Dit kan bijdragen aan meer patiëntcomfort in vergelijking met systemen waarbij de naald automatisch terugtrekt, terwijl het risico op ongecontroleerd spatten wordt verminderd.

De bloedafnamesets zijn universeel kleurgecodeerd per naalddiameter en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder varianten met luer-adapter en met voorgegomteerde buishouder. Hierdoor kan de juiste uitvoering worden gekozen voor de gewenste werkwijze binnen de zorgomgeving.

Overige specificaties

- Latexvrij
- DEHP-vrij
- BPA-vrij

Toepassing

De VenoFlow™ Slide-2-Safety™ bloedafnameset is bedoeld voor het inbrengen in het vasculaire systeem van de patiënt voor bloedafname of kortdurende intraveneuze toediening tot maximaal 2 uur. Het product ondersteunt veilig werken door middel van een actief veiligheidsmechanisme dat helpt bij het voorkomen van accidentele prikincidenten. Uitsluitend te gebruiken onder direct toezicht van een getrainde medische professional.

Het product in detail

Handmatig activeerbare naaldbescherming

Na gebruik wordt het beschermingsmechanisme gecontroleerd over de naald geschoven en veilig vergrendeld. De gebruiker behoudt daarbij volledige controle over het moment van activering.

Optimale grip en controle

De flexibele vleugels bieden een goede grip tijdens het aanprikken en ondersteunen een stabiele positionering van de naald.

Scherpe, patiëntvriendelijke naald


De optimaal geslepen naald ondersteunt een soepele en gecontroleerde venapunctie. De kleurcodering van de vleugels maakt de diameter direct herkenbaar.

Direct klaar voor gebruik

De voormonteerde luer-adapter maakt een eenvoudige aansluiting op een compatibele bloedafnamehouder mogelijk. Er zijn ook uitvoeringen verkrijgbaar met een voormonteerde buishouder.

Flexibele verlenglijn

De flexibele verlenglijn vermindert de overdracht van beweging op de naald en ondersteunt een comfortabele en stabiele bloedafname. De set is verkrijgbaar met een verlenglijn van 18 of 30 cm.

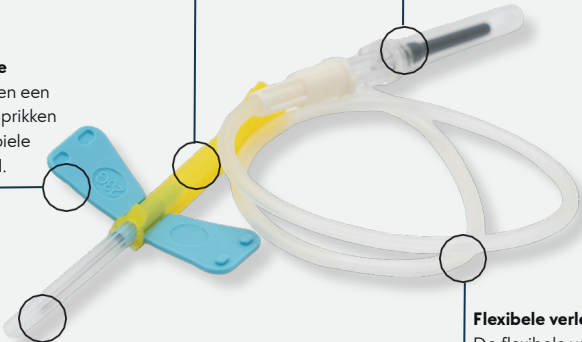

Bestelinformatie

Versie met voormonteerde luer-adapter

Product-code	Naald (G)	Lengte verlenglijn (cm/inch)	Kleur-codering	Verpakkings-eenheid
512240	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	18 cm / 7"	Groen	BOX/50
512240-L	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	30 cm / 12"	Groen	BOX/50
512241	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	18 cm / 7"	Blauw	BOX/50
512241-L	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	30 cm / 12"	Blauw	BOX/50
512242	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	18 cm / 7"	Oranje	BOX/50
512242-L	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	30 cm / 12"	Oranje	BOX/50

Versie met voorgemonteerde luer-adapter en buishouder

Product-code	Naald (G)	Lengte verlenglijn (cm/inch)	Kleur-codering	Verpakkings-eenheid
512243	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	18 cm / 7"	Groen	BOX/25
512243-L	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	30 cm / 12"	Groen	BOX/25
512244	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	18 cm / 7"	Blauw	BOX/25
512244-L	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	30 cm / 12"	Blauw	BOX/25
512245	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	18 cm / 7"	Oranje	BOX/25
512245-L	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	30 cm / 12"	Oranje	BOX/25

Andere uitvoeringen met bijvoorbeeld een andere lengte verlenglijn of zonder luer adapter zijn op aanvraag leverbaar.

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 21-07-2026

VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

