




SteriFlow™

Tuohy epidurale naalden

Zeer nauwkeurige epidurale positionering

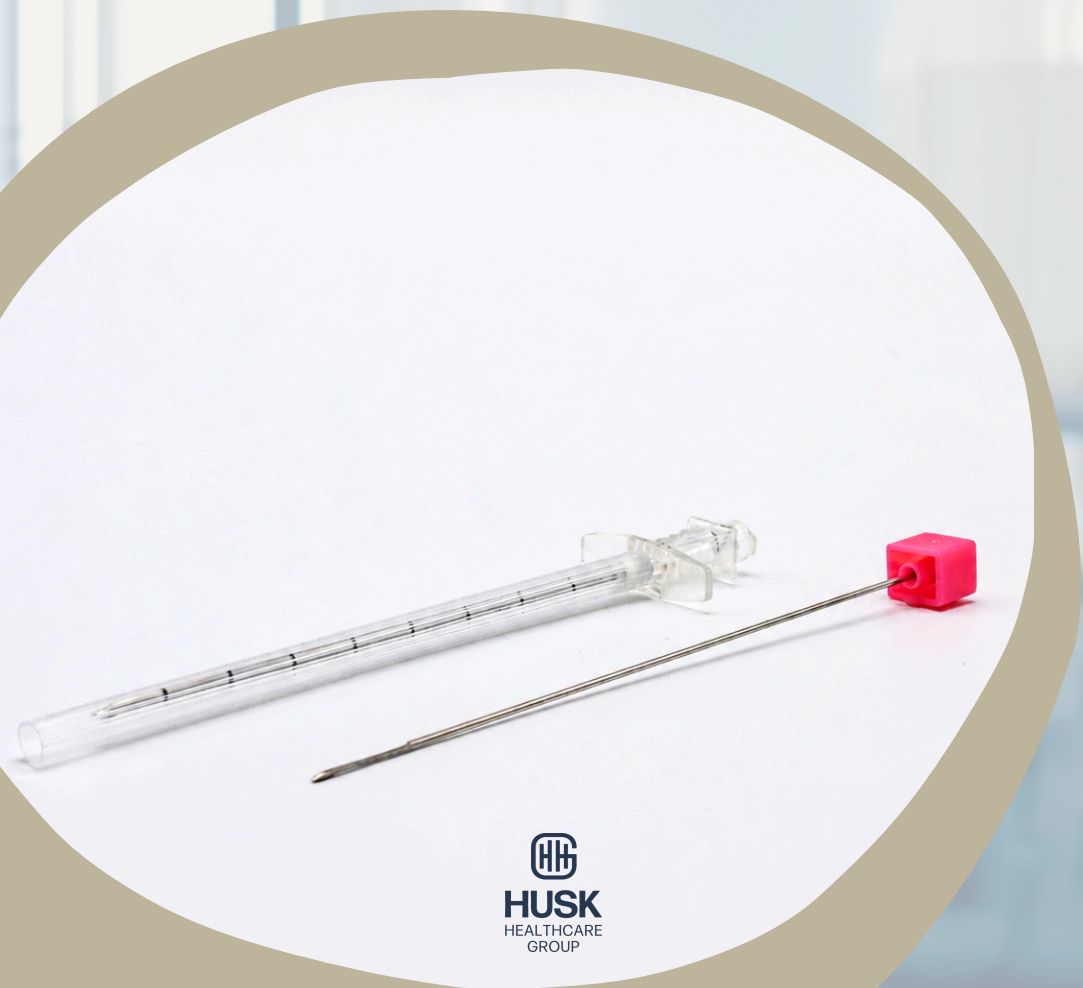


HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Productomschrijving

Bij epidurale anesthesie en analgesie is nauwkeurige toegang tot de epidurale ruimte van essentieel belang. De procedure vraagt om gecontroleerde naaldvoering, duidelijke herkenning van weefselweerstand en betrouwbare introductie van de epidurale katheter. Juist omdat de epidurale ruimte zorgvuldig moet worden geïdentificeerd, veelal met behulp van de *loss-of-resistance*-techniek, is een naald nodig die de gebruiker maximale controle en voorspelbaarheid biedt.¹

SteriFlow™ Tuohy epidurale naalden zijn ontwikkeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij nauwkeurige en gecontroleerde toegang tot de epidurale ruimte. De kenmerkende gebogen Tuohy-tip helpt bij het gericht introduceren en geleiden van de epidurale katheter, zodat deze gecontroleerd in de epidurale ruimte kan worden geplaatst.²

Het geoptimaliseerde naaldpuntprofiel is ontworpen om duidelijke tactiele feedback te ondersteunen tijdens het inbrengen. Deze feedback helpt de gebruiker subtiele veranderingen in weefselweerstand waar te nemen en ondersteunt het zorgvuldig toepassen van de *loss-of-resistance*-techniek bij het lokaliseren van de epidurale ruimte.

De duidelijke centimeter-markering maakt het eenvoudig om de insertiediepte tijdens de procedure te volgen en te controleren. Dit biedt extra houvast bij het positioneren van de naald en draagt bij aan een gestructureerde, reproduceerbare werkwijze.

Voornaamste productvoordelen:


- Ondersteunt betrouwbare epidurale positionering bij anesthesie en analgesie
- Gebogen Tuohy-tip voor gecontroleerde introductie en geleiding van de epidurale katheter
- Geoptimaliseerd naaldpuntprofiel voor duidelijke tactiele weefselfeedback
- Ondersteunt herkenning van de epidurale ruimte via de *loss-of-resistance*-techniek
- Duidelijke centimetermarkering voor eenvoudige controle van de penetratiediepte
- Ontwikkeld voor controle, precisie en gebruiksgemak tijdens epidurale procedures

SteriFlow™ Tuohy epidurale naalden combineren gecontroleerde toegang, gerichte kathetergeleiding en duidelijke dieptecontrole. Dit alles voor betrouwbare ondersteuning bij epidurale anesthesie en analgesie.

¹ World Federation of Societies of Anaesthesiologists. (z.d.). "Practical considerations to access the epidural space". <https://www.wfsahq.org>.

² Benhardt, A.C., Kodali, B.S. All epidural needle bevels are not the same. *Indian J Anaesth.* 2021;65(4):328-330.

Het product in detail

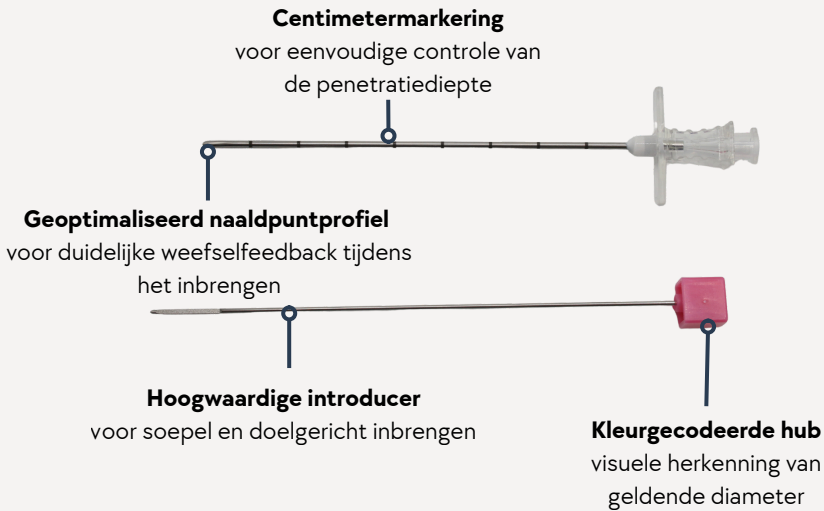

Specificaties

- Klassificering:** Medisch Hulpmiddel klasse III
- Certificering:**
- Geproduceerd volgens ISO 13485
 - EU Conformiteitsverklaring (MDR)
 - CE-certificaat (MDR)
- Toepassingen:** Tuohy epidurale naalden zijn bedoeld voor het lokaliseren en aanprikken van de epidurale ruimte ten behoeve van epidurale anesthesie en analgesie. De gebogen Tuohy-tip ondersteunt gecontroleerde introductie en positionering van een epidurale katheter.
- Overige specificaties:**
- Latex-, DEHP- en PVC-vrij
 - Steriel per stuk verpakt
 - Ook verkrijgbaar als component in complete epidurale of CSE-kits



Bestelinformatie

Productcode	Kleurcode	Diameter	Lengte	Verpakkings-eenheid
400501	Wit	16G	90 mm	BOX/50
400502	Rood	17G	90 mm	BOX/50
400503	Roze	18G	90 mm	BOX/50

SteriFlow™

STERIFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**



Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasterdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

Scan deze QR-code om de
productpagina te bezoeken
voor meer informatie:

