

SteriFlow™

AIGUILLES SPINALES (BISEAU QUINCKE & PENCIL POINT)

Précision et commodité lors de l'anesthésie rachidienne et de la ponction lombaire




Description du produit

La précision est essentielle lors d'une anesthésie sous-arachnoïdienne et d'une ponction lombaire diagnostique. L'aiguille doit permettre un accès fiable à l'espace sous-arachnoïdien, en minimisant les traumatismes tissulaires et en veillant au confort du patient. Une ponction stable et bien maîtrisée facilite le travail du professionnel de santé, qui peut ainsi réaliser l'intervention avec efficacité et précision.

Les aiguilles spinales SteriFlow™ ont été conçues pour la réalisation précise d'anesthésies rachidiennes et de ponctions diagnostiques. Disponibles en versions *Quincke* et *Pencil Point*, elles permettent un choix adapté aux préférences cliniques, à la technique de ponction et à la situation du patient.

L'aiguille de *Quincke* possède une pointe acérée et tranchante, convient à une ponction directe et contrôlée. L'aiguille à pointe crayon (*Pencil Point*) est conçue avec une pointe atraumatique, visant à écarter plutôt qu'à sectionner les fibres dures. Ceci contribue à limiter les traumatismes tissulaires et l'inconfort du patient après la ponction. La littérature scientifique montre que les aiguilles atraumatiques à pointe crayon sont associées à une incidence plus faible de céphalées post-ponction dure que les aiguilles coupantes classiques. Ainsi, la version à pointe crayon favorise une approche centrée sur le patient dans les procédures où la précision, le contrôle et le confort sont essentiels.¹

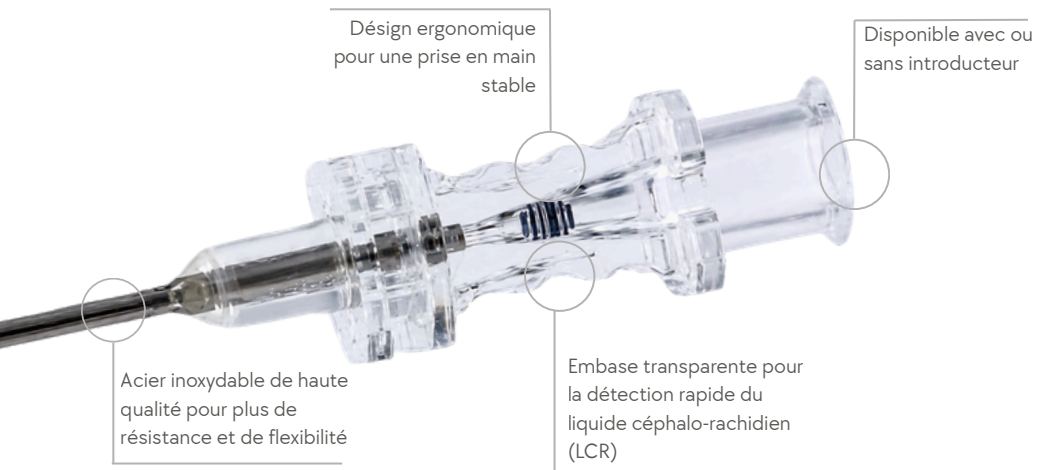

¹ Rochweg B, et al. Atraumatic (pencil-point) versus conventional needles for lumbar puncture: a clinical practice guideline. *BMJ*, 2018.

Informations de commande

Biseau Quincke sans introducteur



Code REF	Diamètre	Longueur (pouces/mm)	Code couleur
400510	16G	3½" / 90 mm	Gris clair
400511	18G	3½" / 90 mm	Rose
400512	19G	3½" / 90 mm	Brun clair
400513	20G	3½" / 90 mm	Jaune
400514	21G	3½" / 90 mm	Vert
400515	22G	3½" / 90 mm	Gris foncé
400516	23G	3½" / 90 mm	Bleu foncé
400517	24G	3½" / 90 mm	Violet
400518	25G	3½" / 90 mm	Orange
400519	26G	3½" / 90 mm	Brun
400520	27G	3½" / 90 mm	Bleu clair

Biseau Quincke avec introducteur



Code REF	Diamètre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Diamètre de l'introducteur	Longueur de l'introducteur	Code couleur
400521	22G	3½" / 90 mm	19G	1½" / 38 mm	Gris foncé
400522	23G	3½" / 90 mm	19G	1½" / 38 mm	Bleu foncé
400523	24G	3½" / 90 mm	20G	1½" / 38 mm	Violet
400524	25G	3½" / 90 mm	20G	1½" / 38 mm	Orange
400525	26G	3½" / 90 mm	21G	1½" / 38 mm	Brun
400526	27G	3½" / 90 mm	22G	1½" / 38 mm	Bleu clair

Biseau Pencil Point sans introducteur



Code REF	Diamètre	Longueur (pouces/mm)	Code couleur
400530	18G	3½" / 90 mm	Rose
400531	19G	3½" / 90 mm	Brun clair
400532	20G	3½" / 90 mm	Jaune
400533	21G	3½" / 90 mm	Vert
400534	22G	3½" / 90 mm	Gris foncé
400535	23G	3½" / 90 mm	Bleu foncé
400536	24G	3½" / 90 mm	Violet
400537	25G	3½" / 90 mm	Orange
400538	26G	3½" / 90 mm	Brun
400539	27G	3½" / 90 mm	Bleu clair



Biseau Pencil Point avec introducteur

Code REF	Diamètre de l'aiguille	Longueur de l'aiguille	Diamètre de l'introducteur	Longueur de l'introducteur	Code couleur
400540	22G	3½" / 90 mm	19G	1½" / 38 mm	Gris foncé
400541	23G	3½" / 90 mm	19G	1½" / 38 mm	bleu foncé
400542	24G	3½" / 90 mm	20G	1½" / 38 mm	Violet
400543	25G	3½" / 90 mm	20G	1½" / 38 mm	Orange
400544	26G	3½" / 90 mm	21G	1½" / 38 mm	Brun
400545	27G	3½" / 90 mm	22G	1½" / 38 mm	bleu clair

Informations sur l'emballage

Emballés individuellement et stériles sous blister, puis par BOÎTE/50.

Scannez ce code QR pour accéder à la page produit et obtenir plus d'informations :



SteriFlow™

STERIFLOW™ est une marque déposée de **Husk Healthcare Group B.V.**

Intéressé?

Pour plus d'informations, contactez votre partenaire local en scannant le code QR et en sélectionnant votre pays :

