




SteriFlow™

Aiguilles péridurales Tuohy

Pour un positionnement péridural précis

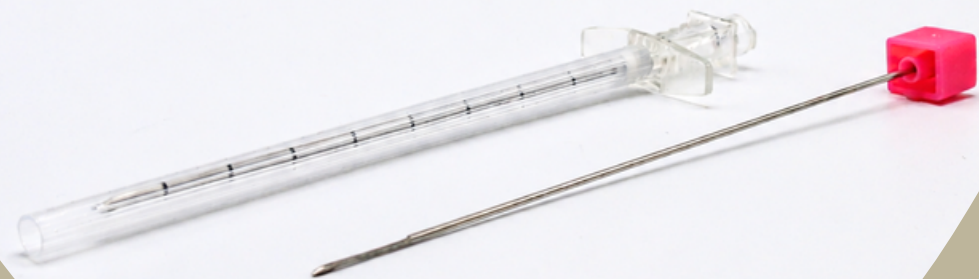


HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Description du produit

En anesthésie et analgésie péridurales, l'accès précis à l'espace péridural est essentiel. La procédure exige un guidage précis de l'aiguille, une reconnaissance claire de la résistance tissulaire et une introduction fiable du cathéter péridural. Parce que l'espace péridural doit être identifié avec précision, souvent par la technique de perte de résistance, une aiguille offrant à l'utilisateur un contrôle et une prévisibilité optimaux est nécessaire.¹

Les aiguilles péridurales SteriFlow™ Tuohy ont été développées pour aider les professionnels de santé à obtenir un accès précis et contrôlé à l'espace péridural. Leur extrémité incurvée caractéristique, de type Tuohy, facilite l'introduction ciblée et le guidage du cathéter péridural, permettant ainsi son placement contrôlé dans l'espace péridural.²

Le profil optimisé de l'extrémité de l'aiguille est conçu pour procurer un retour tactile clair lors de l'insertion. Ce retour permet à l'utilisateur de percevoir les variations subtiles de résistance tissulaire et facilite l'application rigoureuse de la technique de perte de résistance lors de la localisation de l'espace épidural. Le marquage clair en centimètres permet de contrôler facilement la profondeur d'insertion pendant la procédure. Cela facilite le positionnement de l'aiguille et contribue à une méthode de travail structurée et reproductible.

Principaux avantages du produit :

- Permet un positionnement péridural fiable pour l'anesthésie et l'analgésie
- Extrémité Tuohy incurvée pour une introduction et un guidage contrôlés du cathéter péridural
- Profil optimisé de l'extrémité de l'aiguille pour un retour tactile tissulaire précis
- Permet de reconnaître l'espace épidural grâce à la technique de perte de résistance
- Gradation centimétrique claire pour un contrôle aisé de la profondeur de pénétration
- Conçu pour le contrôle, la précision et la facilité d'utilisation lors des procédures péridurales

Les aiguilles péridurales SteriFlow™ Tuohy combinent un accès contrôlé, un guidage précis du cathéter et un contrôle précis de la profondeur. Le tout visant à garantir un soutien fiable lors de l'anesthésie et de l'analgésie péridurales.

¹ World Federation of Societies of Anaesthesiologists. (z.d.). "Practical considerations to access the epidural space". <https://www.wfsahq.org>.

² Benhardt, A.C., Kodali, B.S. All epidural needle bevels are not the same. Indian J Anaesth. 2021;65(4):328-330.

Le produit en détail

Graduations en centimètres

pour faciliter le contrôle de la profondeur de pénétration



Profil optimisé de la pointe de l'aiguille

pour un retour d'information clair des tissus lors de l'insertion



Introduceur de haute qualité

pour une insertion douce et ciblée

Moyeu à code couleur

confirmation visuelle du diamètre applicable



Caractéristiques

Classification:

Dispositif médical de classe III

Certification :

- Fabriqué conformément à la norme ISO 13485
- Déclaration de conformité de l'UE (MDR)
- Certificat CE (MDR)

Applications :

Les aiguilles péridurales de Tuohy sont conçues pour localiser et ponctionner l'espace péridural en vue d'une anesthésie et d'une analgésie péridurales. Leur extrémité incurvée permet une introduction et un positionnement contrôlés du cathéter péridural.

Autres spécifications :

- Sans latex, DEHP ni PVC
- Stérile emballé individuellement
- Également disponible en tant que composant des SteriFlow™ EPI & CSE kits complets d'anesthésie péridurale ou de rachianesthésie combinée.



Informations de commande

Code produit	Code couleur	Diamètre	Longueur	Unité d'emballage
400501	Blanc	16G	90 mm	BOÎTE/50
400502	Rouge	17G	90 mm	BOÎTE/50
400503	Rose	18G	90 mm	BOÎTE/50

*Scannez ce code QR pour accéder à
la page produit et obtenir plus
d'informations :*



SteriFlow™

STERIFLOW™ est une marque déposée de **Husk Healthcare Group B.V.**



Intéressé?

Pour plus d'informations,
contactez votre partenaire
local en scannant le code QR
et en sélectionnant votre
pays :

