

UriFlow™



Latex Foley ballonkatheters

Betrouwbare keuze voor blaaskatheterisatie



HUSK
HEALTHCARE
GROUP

PRODUCTOMSCHRIJVING

De UriFlow™ latex Foley-katheters zijn een zeer gangbare oplossing voor blaaskatheterisatie. Afhankelijk van uw voorkeuren hebben wij ook siliconen Foley-katheters beschikbaar.


Voornaamste productkenmerken:

- De universele aansluiting past op alle standaard aansluitingen van urinezakken
- Gemaakt van zacht en flexibel latex, dat bestand is tegen buigen en knikken
- Voorzien van atraumatische, zacht afgeronde, speciale tip die het inbrengen vergemakkelijkt
- Bevat twee laterale ogen met gladde randen
- Katheter-oppervlak met siliconencoating voor gemakkelijk inbrengen
- Voorzien van een ballon in verschillende vulvolumes voor veilige fixatie van de katheter in de blaas
- Naast standaard 2-wegs variant is er ook een 3-wegs versie, die toedienen van spoelvloeistoffen mogelijk maakt bij blaasspoeling
- Standaard voorzien van ronde (Nelaton) tip, optioneel verkrijgbaar met speciale tips zoals Tiemann-, voerdraad- of Dufour-uitvoering
- Voor vrouwelijke patiënten is een kortere versie van de 2-weg katheter beschikbaar (zie laatste pagina)

Belangrijke producteigenschappen in beeld



Voorzien van internationale
kleurcodering volgens ISO
20696

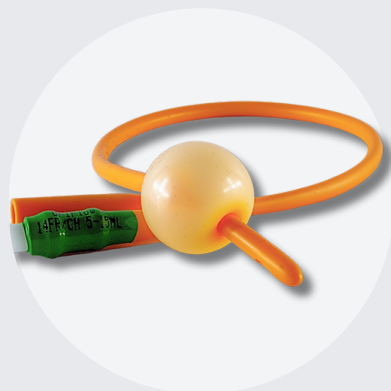

Verkrijgbaar in diverse
uitvoeringen met verschillende
ballonvolumes en tips

BESTELINFORMATIE

2-wegs latex Foley-katheter

Productcode	Maat (FR/CH)	Diameter (± 0.33 mm)	Totale lengte (min)	Ballonvolume (range)	NRV kleurcode	Verpakkings-eenheid
530150-6	6	2.00 mm	220 mm	1.5 - 3 ml	Lichtgroen	BOX/60x10
530150-8	8	2.70 mm	220 mm	3 - 5 ml	Blauw	BOX/60x10
530150-10	10	3.30 mm	220 mm	3 - 5 ml	Zwart	BOX/60x10
530150-12	12	4.00 mm	360 mm	5 - 15 ml	Wit	BOX/60x10
530150-14-L	14	4.70 mm	360 mm	5 - 15 ml	Groen	BOX/60x10
530150-14-H	14	4.70 mm	360 mm	15 - 30 ml	Groen	BOX/60x10
530150-16-L	16	5.30 mm	360 mm	5 - 15 ml	Oranje	BOX/60x10
530150-16-H	16	5.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Oranje	BOX/60x10
530150-18-L	18	6.00 mm	360 mm	5 - 15 ml	Rood	BOX/60x10
530150-18-H	18	6.00 mm	360 mm	30 - 50 ml	Rood	BOX/60x10
530150-20-L	20	6.70 mm	360 mm	5 - 15 ml	Geel	BOX/60x10
530150-20-H	20	6.70 mm	360 mm	30 - 50 ml	Geel	BOX/60x10
530150-22	22	7.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Paars	BOX/60x10
530150-24	24	8.00 mm	360 mm	30 - 50 ml	Blauw	BOX/60x10
530150-26	26	8.70 mm	360 mm	30 - 50 ml	Roze	BOX/60x10
530150-28	28	9.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Bruin	BOX/60x10
530150-30	30	10.00 mm	360 mm	30 - 50 ml	Zwart	BOX/60x10

3-wegs latex Foley-katheter

Productcode	Maat (FR/CH)	Diameter (± 0.33 mm)	Totale lengte (min)	Ballonvolume (range)	NRV kleurcode	Verpakkings-eenheid
530151-14-L	14	4.70 mm	360 mm	5 - 15 ml	Groen	BOX/60x10
530151-14-H	14	4.70 mm	360 mm	15 - 30 ml	Groen	BOX/60x10
530151-16-L	16	5.30 mm	360 mm	5 - 15 ml	Oranje	BOX/60x10
530151-16-H	16	5.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Oranje	BOX/60x10
530151-18-L	18	6.00 mm	360 mm	5 - 15 ml	Rood	BOX/60x10
530151-18-H	18	6.00 mm	360 mm	30 - 50 ml	Rood	BOX/60x10
530151-20-L	20	6.70 mm	360 mm	5 - 15 ml	Geel	BOX/60x10
530151-20-H	20	6.70 mm	360 mm	30 - 50 ml	Geel	BOX/60x10
530151-22	22	7.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Paars	BOX/60x10
530151-24	24	8.00 mm	360 mm	30 - 50 ml	Blauw	BOX/60x10
530151-26	26	8.70 mm	360 mm	30 - 50 ml	Roze	BOX/60x10
530151-28	28	9.30 mm	360 mm	30 - 50 ml	Bruin	BOX/60x10

BESTELINFORMATIE

2-wegs Foley-katheter (kort model)

Productcode	Maat (FR/CH)	Diameter (± 0.33 mm)	Totale lengte (min)	Ballonvolume (range)	NRV kleurcode	Verpakkings-eenheid
530530-12	12	4.00 mm	270 mm	5 - 15 ml	Wit	BOX/60x10
530530-14-L	14	4.70 mm	270 mm	5 - 15 ml	Groen	BOX/60x10
530530-14-H	14	4.70 mm	270 mm	15 - 30 ml	Groen	BOX/60x10
530530-16-L	16	5.30 mm	270 mm	5 - 15 ml	Oranje	BOX/60x10
530530-16-H	16	5.30 mm	270 mm	30 - 50 ml	Oranje	BOX/60x10
530530-18-L	18	6.00 mm	270 mm	5 - 15 ml	Rood	BOX/60x10
530530-18-H	18	6.00 mm	270 mm	30 - 50 ml	Rood	BOX/60x10
530530-20-L	20	6.70 mm	270 mm	5 - 15 ml	Geel	BOX/60x10
530530-20-H	20	6.70 mm	270 mm	30 - 50 ml	Geel	BOX/60x10
530530-22	22	7.30 mm	270 mm	30 - 50 ml	Paars	BOX/60x10

Versie nummer: 1.0
Publicatiedatum: 23-07-2026

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



UriFlow™

URIFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com