

VENOFLOW™

VenoFlow™ PRO veilige bloedafnamenaald met zichtvenster

Extra zekerheid door visuele bevestiging van
venapunctie



Productomschrijving

Bij veneuze bloedafname zijn controle, veiligheid en een efficiënte workflow essentieel. Zorgprofessionals moeten snel kunnen beoordelen of de vene correct is aangeprikt, terwijl het risico op prikaccidenten na gebruik zo veel mogelijk moet worden beperkt. Dit is vooral belangrijk binnen drukke professionele zorgomgevingen zoals prikposten, laboratoria, verpleegafdelingen en poliklinieken.

De VenoFlow™ PRO veilige bloedafnamenaald combineert visuele ondersteuning tijdens de punctie met een geïntegreerd veiligheidsmechanisme na gebruik. Het flashback-venster geeft de gebruiker snellere en duidelijkere visuele bevestiging van veneuze toegang: zodra bloed zichtbaar wordt in het venster, kan de zorgprofessional zien dat de vene is aangeprikt. Dit ondersteunt een gecontroleerde venapunctie en kan vooral meerwaarde bieden bij patiënten met moeilijk aanprikbare, kleine of fragiele venen, of bij gebruik door minder ervaren bloedafname-medewerkers.

Na de bloedafname kan het veiligheidsmechanisme eenvoudig met één hand worden geactiveerd. De naald wordt daarbij afgeschermd, zodat het risico op accidenteel contact met de gebruikte naald wordt beperkt. Het mechanisme is onomkeerbaar: eenmaal geactiveerd kan de naald niet opnieuw worden gebruikt. Dit ondersteunt een veilige en hygiënische werkwijze en draagt bij aan het verminderen van prikaccidenten binnen de bloedafnameprocedure.

De VenoFlow™ PRO is geschikt voor veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen en kan worden gebruikt in combinatie met compatibele bloedafnamebuizen. Indien nodig kunnen meerdere buizen achter elkaar worden aangesloten, zonder dat de naald hoeft te worden gewisseld. Hierdoor kan de benodigde hoeveelheid bloed efficiënt en gecontroleerd worden afgenomen.

De naald is vervaardigd uit hoogwaardig staal en heeft een scherpe, nauwkeurige punt voor een gecontroleerde punctie. De VenoFlow™ PRO is verkrijgbaar in de gangbare maatvoering 21G en 22G, met of zonder voorgemonteerde houder.


Overige specificaties

Latexvrij, steriel en voor eenmalig gebruik

Toepassing

De VenoFlow™ PRO veilige bloedafnamenaalden worden gebruikt voor veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Dankzij het kijkvenster is visuele bevestiging van een correcte venapunctie mogelijk, terwijl het geïntegreerde veiligheidsmechanisme helpt het risico op naaldprikaccidenten na gebruik te verminderen.

Het product in detail

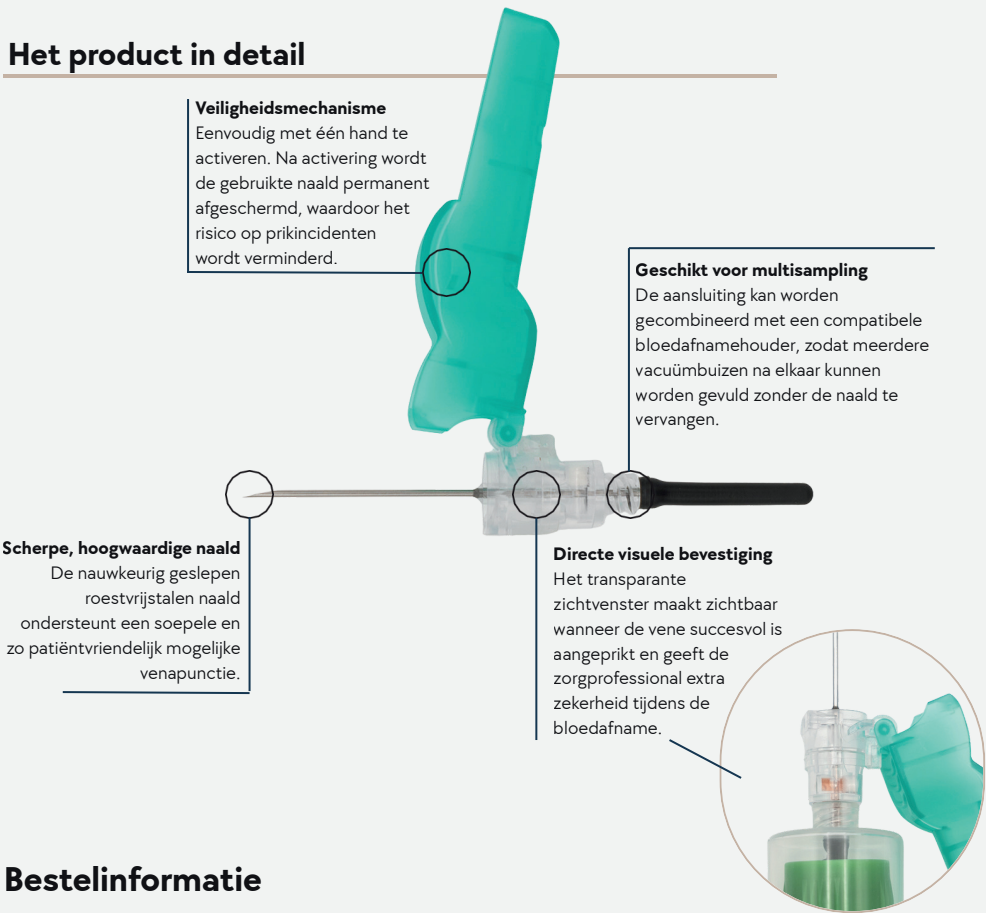

Bestelinformatie

Standaardversie (zonder houder)

Product-code	Kleurcodering	Maat (G)	Diameter naald	Naaldlengte	Verpakkings-eenheid
512155	Groen	21G	0.8 mm	1" (25 mm)	BOX/50
512156	Zwart	22G	0.7 mm	1" (25 mm)	BOX/50

Versie met houder

Product-code	Kleurcodering	Maat (G)	Diameter naald	Naaldlengte	Verpakkings-eenheid
512155-H	Groen	21G	0.8 mm	1" (25 mm)	BOX/25
512156-H	Zwart	22G	0.7 mm	1" (25 mm)	BOX/25

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



Versie nummer: 1.0

Publicatiedatum: 21-07-2026



VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

