

VENGFLOW™

AutoRetract™ automatische veilige bloedafname-set

Automatische naaldveiligheid met één druk op
de knop!



HUSK
HEALTHCARE
GROUP

Productomschrijving

Deze bloedafnameset met automatisch naaldveiligheidsmechanisme is ontworpen voor veilige en efficiënte veneuze bloedafname binnen professionele zorg-omgevingen. Dankzij het geïntegreerde veiligheidsmechanisme blijven de handen van de gebruiker tijdens en na de bloedafname zo ver mogelijk verwijderd van de naald en scherpe naaldpunt.


Na gebruik kan de naald met één druk op de knop automatisch worden teruggetrokken in het veiligheidsmechanisme. De veerconstructie zorgt ervoor dat de naald direct wordt afgeschermd, waardoor het risico op naaldprikaccidenten aanzienlijk wordt verminderd¹. Dit draagt bij aan een veilige werkwijze voor zowel zorgprofessional als patiënt.

De bloedafname-sets zijn universeel kleurgecodeerd en verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waaronder met of zonder Luer-adapter, met of zonder buishouder en met een korte of lange verlenglijn. Hierdoor kan eenvoudig de juiste uitvoering worden gekozen voor verschillende bloedafnameprocedures en gebruikersvoorkeuren.

Toepassing

Deze bloedafnameset wordt gebruikt voor veilige en efficiënte veneuze bloedafname binnen professionele zorgomgevingen. Het automatische naaldveiligheidsmechanisme helpt het risico op naaldprikaccidenten na gebruik te verminderen en ondersteunt een veilige werkwijze voor de zorgprofessional.

Het product in detail

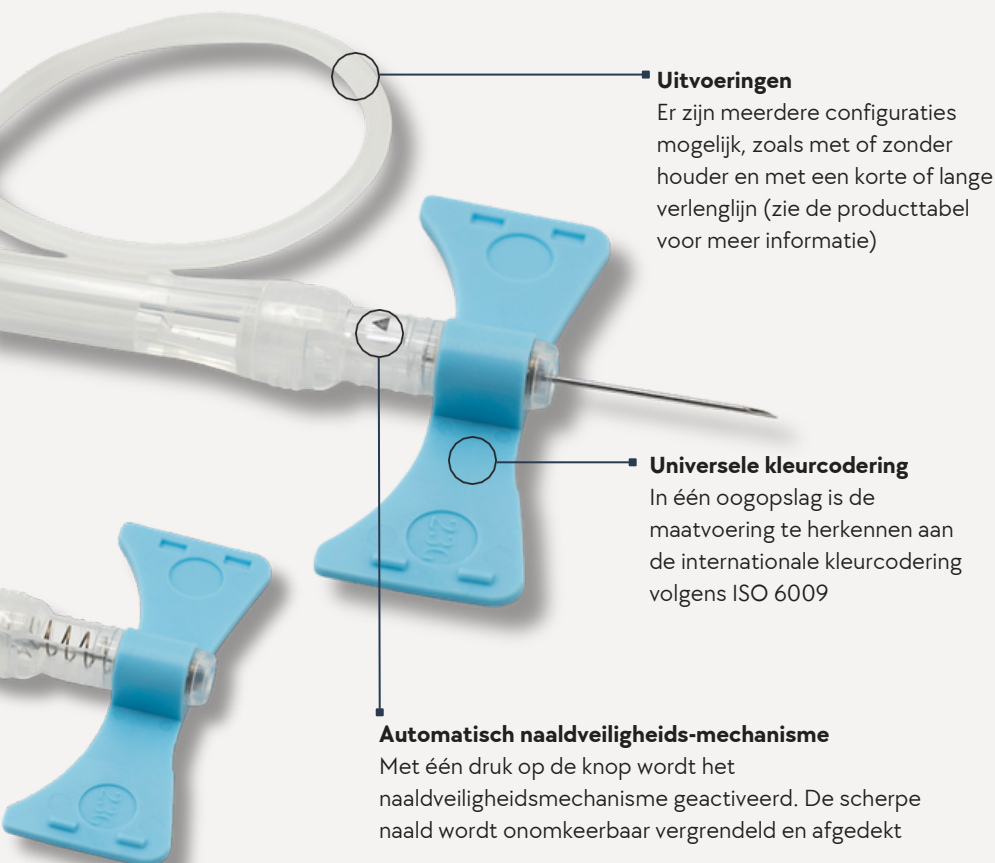

Uitvoeringen

Er zijn meerdere configuraties mogelijk, zoals met of zonder houder en met een korte of lange verlenglijn (zie de producttabel voor meer informatie)

Universele kleurcodering

In één oogopslag is de maatvoering te herkennen aan de internationale kleurcodering volgens ISO 6009

Automatisch naaldveiligheids-mechanisme

Met één druk op de knop wordt het naaldveiligheidsmechanisme geactiveerd. De scherpe naald wordt onomkeerbaar vergrendeld en afgedekt

Bestelinformatie

Versie met Luer adapter

Product-code	Diameter en lengte naald	Lengte verlenglijn (cm)	Kleurcode	Verpakkings-eenheid
512223	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	18 cm	Groen	BOX/50
512223-L	21Gx $\frac{3}{4}$ " (0.8 x 19 mm)	30 cm	Groen	BOX/50
512224	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	18 cm	Blauw	BOX/50
512224-L	23Gx $\frac{3}{4}$ " (0.6 x 19 mm)	30 cm	Blauw	BOX/50
512225	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	18 cm	Oranje	BOX/50
512225-L	25Gx $\frac{3}{4}$ " (0.5 x 19 mm)	30 cm	Oranje	BOX/50

Versie met Luer adapter en voorgesmonteerde buishouder

Product-code	Diameter en lengte naald	Lengte verlenglijn (cm)	Kleurcode	Verpakkings-eenheid
512226	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	18 cm	Groen	BOX/50
512226-L	21Gx¾" (0.8 x 19 mm)	30 cm	Groen	BOX/50
512227	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	18 cm	Blauw	BOX/50
512227-L	23Gx¾" (0.6 x 19 mm)	30 cm	Blauw	BOX/50
512228	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	18 cm	Oranje	BOX/50
512228-L	25Gx¾" (0.5 x 19 mm)	30 cm	Oranje	BOX/50

Andere uitvoeringen met bijvoorbeeld een langere verlenglijn of zonder lueradapter zijn op aanvraag leverbaar.

Versienummer: 1.0

Publicatiedatum: 23-07-2026

Scan deze QR-code om de productpagina te bezoeken voor meer informatie:



VENOFLOW™

VENOFLOW™ is een geregistreerd merk van **Husk Healthcare Group B.V.**

Husk Medical B.V.

Kelvinring 44

2952 BG Alblasserdam

Tel: 078-3032867

Mail: info@huskmedical.com

www.huskmedical.com

